

1. กดเพื่อเลือกประเภท
ผู้ป่วยคนใหม่

2. ใส่น้ำหนัก IBW โดยตรง

3. หรือเลือกเพศ
และส่วนสูงของผู้ป่วย

4. กดเลือกชนิด
ชุดทำความชื้น

5. ถ้าต้องการ
Calibrate
ให้กดปุ่มนี้

6. ถ้าต้องการเลือกค่า
setting เดิมให้กดปุ่มนี้

7. กดเพื่อยืนยัน
และเข้าสู่การตั้งค่าต่อไป

03/04/2020 11:14:48

eVent Medical

eVolution 3e

Patient ID: Room/Bed No:

Patient Type: Adult

Patient Option

New Patient

Adult

Pediatric

Neonate

Current Patient

New Patient Startup

Ideal Body Weight (IBW)

IBW

Patient Height

kg

cm

Gender

Male

Calibrations

Humidification Type

HME

ACCEPT

O2 Sensor: Calibration needed

Circuit Check: Calibration needed

EXH Flow Sensor: Calibration needed

System Compliance: — ml/cmH2O

Software Versions - 2.0.0 - 2.1.1 - 6.5.00

ขั้นตอนการทดสอบ ก่อนใช้งาน

1. กดปุ่ม Calibrations

The screenshot shows the 'New Patient Startup' screen of the eVent Medical 3e software. The interface is dark-themed with blue accents. At the top left, 'eVent Medical' is displayed. At the top right, 'eVolution 3e' is shown. Below the top bar, there's a section for 'Patient Type: Adult' and a field for 'Patient ID: Room/Bed ID:'. The main area is divided into two columns. The left column, titled 'Patient Option', contains buttons for 'New Patient' (with sub-options 'Adult', 'Pediatric', 'Neonate') and 'Current Patient'. The right column, titled 'New Patient Startup', contains fields for 'Ideal Body Weight (IBW)' in kg, 'Patient Height' in cm, 'Gender' (set to 'Male'), and 'Humidification Type' (set to 'HME'). A yellow arrow points from the 'Calibrations' button in the right column to the '1. กดปุ่ม Calibrations' text box. At the bottom left, there's a status section with 'O2 Sensor: Calibration needed', 'Circuit Check: Calibration needed', 'EXH Flow Sensor: Calibration needed', and 'System Compliance: — ml/cmH2O'. At the bottom right, there's an 'ACCEPT' button and 'Software Versions - 2.0.0 - 2.1.1 - 6.5.00'.

eVent Medical

eVolution[®] 3e

Patient Type: Adult

ID Patient ID:
Room/Bed ID:

Patient Option

New Patient

Adult

Pediatric

Neonate

Current Patient

New Patient Startup

Ideal Body Weight (IBW)

IBW Patient Height

kg cm

Gender

Male

Humidification Type

HME

Calibrations

ACCEPT

O2 Sensor: Calibration needed
Circuit Check: Calibration needed
EXH Flow Sensor: Calibration needed
System Compliance: — ml/cmH2O

Software Versions - 2.0.0 - 2.1.1 - 6.5.00

« BACK

Calibrations

Circuit Check

O2 Sensor

EXH Flow Sensor

Calibration needed

START

Sensor Zeroing

Leak Test

Compliance

Insp. Resistance

Exp. Resistance


2. กดปุ่ม START แล้ว
ปฏิบัติตามที่เครื่องสั่ง

ขั้นตอนการปรับตั้ง Mode และค่าการช่วยหายใจ

1. เลือก Mode ที่ต้องการ
CMV, SIMV, SPONT
Auto control หรือ
High Flow

2. เลือกชนิดของการ Control
Pressure, Volume หรือ PRVC

3. ปรับตั้งค่าการช่วยหายใจ
ตามต้องการ

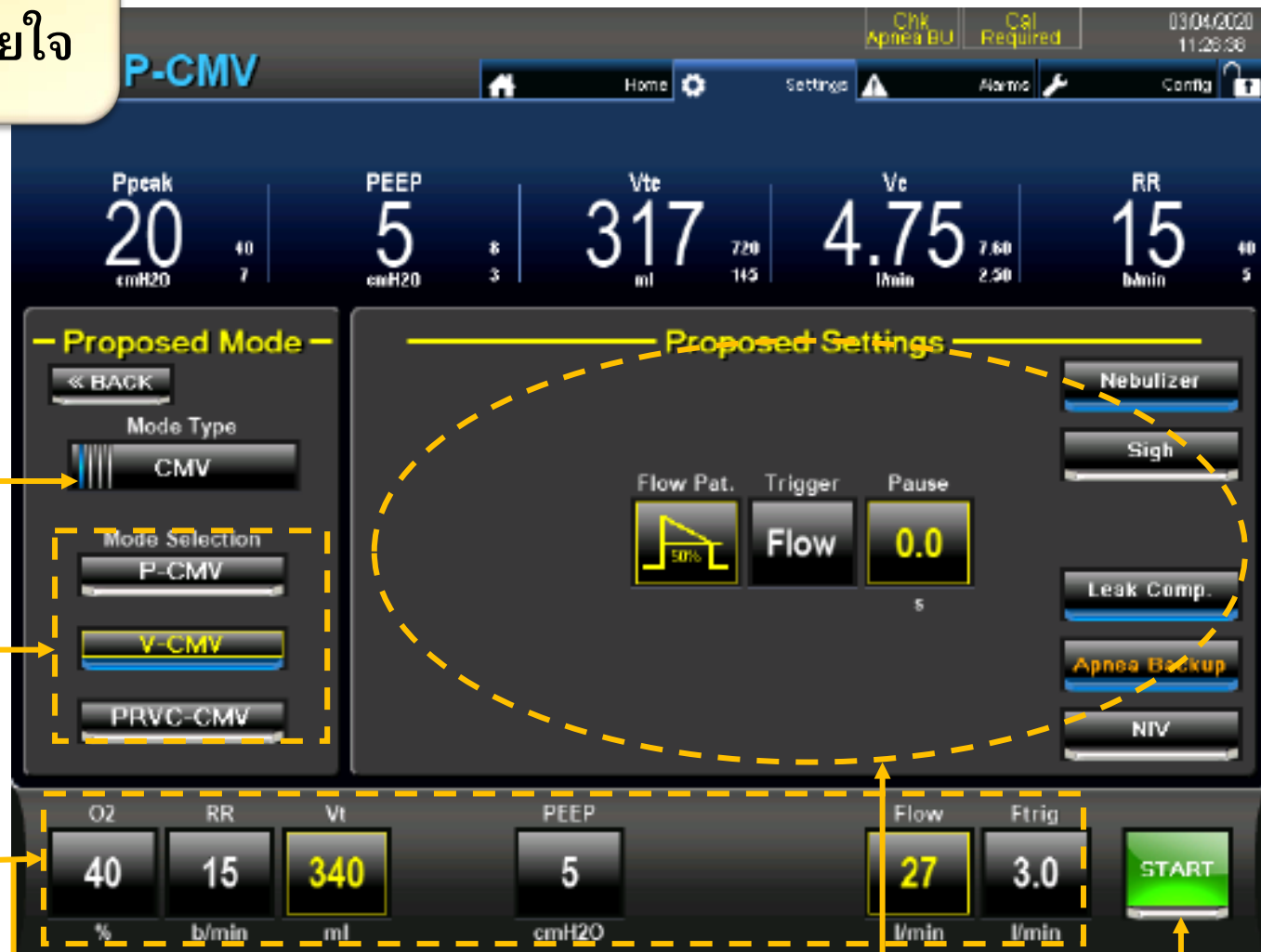

4. กดปุ่ม START
เพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน

ขั้นตอนการปรับตั้งค่า Alarms


1. กดแถบ Alarms

2. ปรับตั้งค่า
High และ Low
Alarms ตามต้องการ
หรือกดปุ่ม Auto
เพื่อให้เครื่องตั้งให้



ขั้นตอนการพ่นยา

1. กด Tab Icon รูป แว่นขยาย

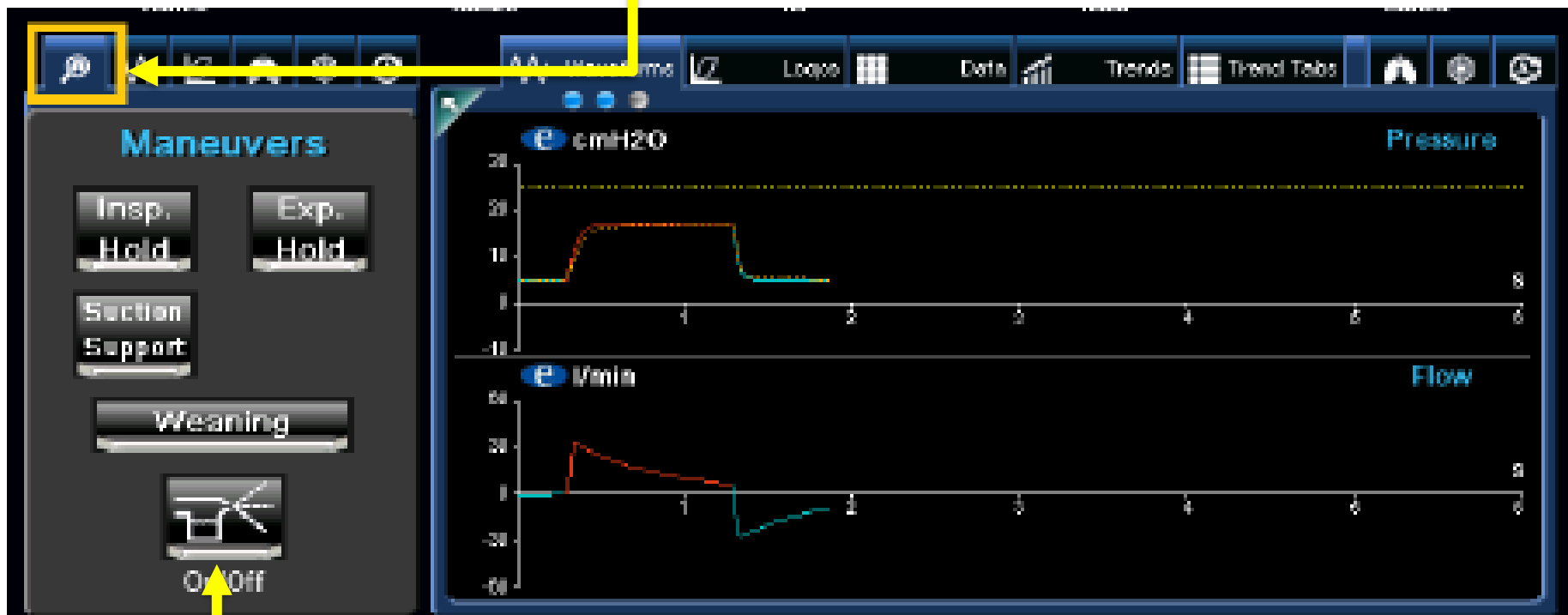

2. กดปุ่ม icon พ่นยา

! หมายเหตุ หากต้องการปรับเวลาการพ่นยา
ให้ไปปรับที่หน้าต่าง Setting -> Nebulizer

การต่อสายหายใจ

